



Ce produit est conforme avec la directive 93/42/EEC des dispositifs médicaux.
This product is conform with the directive 93/42/EEC for medical products.


Référence P / Reference P :

049441 - 049445 - 049448 - 049449 - 049535 - 049541 - 049542
- 049561 049619 - 049632 - 049641 - 049661 - 049719 - 049732
- 049741 - 049761 - 049819 - 049832 - 049833 - 049840 - 049850 -
049860 - 049880 - 049890 - 049919 - 049932 - 049933 - 049940 - 049950
- 049960 - 049980 - 049990

Fonction Function

Permet à l'utilisateur de prendre appui en toute sécurité.
Allows the user to lean safely.

Descriptif Description

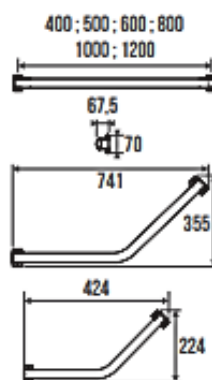

049441-049445-049448- 049449-049535-049541- 049542-049561-049632-049732- 049741-049761-049832- 049833-049932-049933-049641- 049840-049940-049850- 049950-049661-049860-049960	150 kg
049880-049980	120 kg
049890-049990	100 kg
049619-049719-049819 049919	90 kg
049619-049719 049819-049919	0,920 kg
049833-049933	0,677 kg
049441-049445-049448- 049449-049541-049542- 049632-049641-049732-049741- 049832-049840-049932-049940	0,445 kg
049850-049950	0,500 kg
049561-049661-049761 049860-049960	0,545 kg
049880-049980	0,676 kg
049890-049990	0,796 kg

Numéro notice / Instruction sheet No.

A04984002

Date de création / Creation date

15/01/2014

Révision n° / Revision No.

10

Date / Date

21/03/22



Poids maximum utilisateur / Max. user weight



Poids du produit / Net weight

en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ces produits.

En fin de vie, le produit doit être confié par l'utilisateur à la filière de récupération homologuée à cet effet dans le pays d'utilisation.


GB Do not install this equipment before reading the following instructions:

Fitting instructions. Grab bars: Advised height 80 cm from the ground. Straight grab bars can be installed obliquely (135°) or horizontally. Before drilling into the wall, physically hold the product against the wall and mark the position of the holes to be drilled. Plugs have to be selected according to the type of wall. The fixing points have to be necessarily respected. **Care and maintenance. IMPORTANT:** In order to guarantee the lasting quality of this product and its safety for the user, we recommend that when cleaning it you should use mild soap solutions. **CAUTION: DO NOT USE** cleaning products made of etones, hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. After use of a cleaning product, make a rinsing in the clear water. **Safety warnings. Grab bars:** Grab bars add security to the user if they are fitted according to instructions. After fitting and before using, make sure that the fixing screws are tightened securely. DO NOT use grab bar as a step to reach area, do not sit or hang on grab bar, use it for assistance ONLY. **The product does not contain any hazardous substances. The manufacturer shall have no liability for any injury caused by improper installation or use of this grab bar.** At the end of its life cycle, the user must have the product recycled by a certified facility in the country of use.


1




2

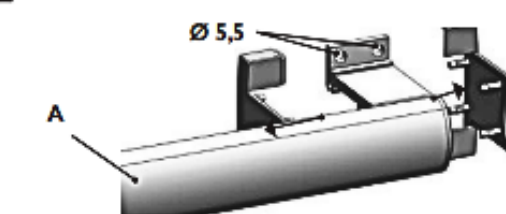


3

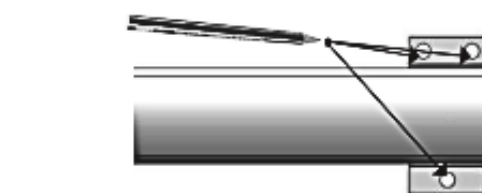


4

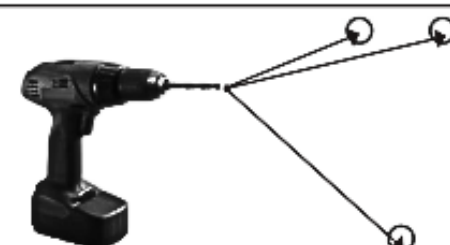


5

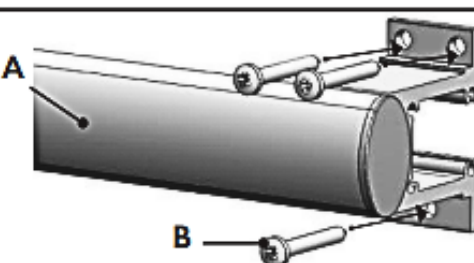


6

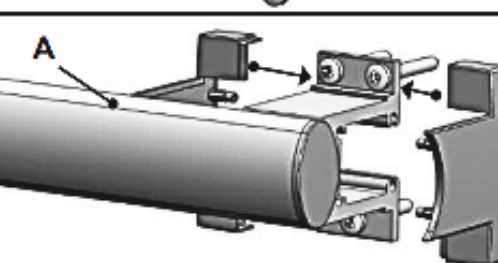

7

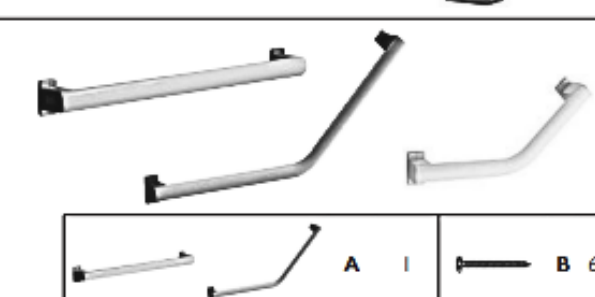

DEMONTAGE DES ENTRETOISES / DISMOUNTING SPACER

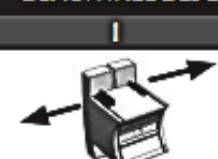

Démonter l'entretoise de son support
Remove the dismounting spacer from its bracket



Jeter l'entretoise, se reporter aux consignes de recyclage local
Discard spacer, refer to local recycling locker

Hopmoov