



Poids maximum utilisateur / Max. user weight



Poids du produit / Net weight

CE

Ce produit est conforme avec la directive 93/42/EEC des dispositifs médicaux.
This product is conform with the directive 93/42/EEC for medical products.

Référence G / Reference G :

491301 - 491351 - 491361 - 491601
492351 - 492451 - 492461

Référence P / Reference P :

049130 - 049140 - 049150 - 049160 - 049180 - 049220
049230 - 049250 - 049270 - 049330 - 049340 - 049360
049390 - 049391 - 113131 - 113133 - 113221 - 113223

Fonction
Function

Permet à l'utilisateur de prendre appui en toute sécurité.
Allows the user to lean safely.

Descriptif
Description



kg

kg

049130 - 491301	
049140 - 049150	
049160 - 491601	
049220 - 492351	
049230 - 049250	
049270 - 049340	
049360 - 049390	150 kg
049391	
113131 - 491361	
113133 - 491351	
113221 - 492461	
113223 - 492451	
049180 - 049330	120 kg
049130 - 491301	
113131 - 491361	0,395 kg
113133 - 491351	
049140	0,470 kg
049150	0,565 kg
049160 - 491601	0,635 kg
049180	0,790 kg
049220 - 492351	
113221 - 492461	0,555 kg
113223 - 492451	
049230	0,780 kg
049250	0,985 kg
049270	0,855 kg
049330	1,255 kg
049340	1,180 kg
049360	1,840 kg
049390 - 049391	1,800 kg

Numéro notice / Instruction sheet No.

A49130137

Date de création / Creation date

22/03/2011

Révision n° / Revision No.

08



Date / Date








18/03/2021

Ne pas installer cet équipement avant d'avoir lu les instructions ci-dessous :
Instructions de montage. Hauteur conseillée 80 cm du sol. Les barres droites peuvent s'installer à l'oblique (135°) ou à l'horizontale. Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Le choix des chevilles doit être adapté au support mural. Les points de fixation doivent être impérativement respectés. **Entretien et nettoyage. IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des

solutions de savon doux. **ATTENTION : NE PAS UTILISER** de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire. **⚠ Avertissements liés à la sécurité.** Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre, ne l'utiliser que pour vous aider. **Les produits ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ces produits.** En fin de vie, le produit doit être confié par l'utilisateur à la filière de récupération homologuée à cet effet dans le pays d'utilisation.

GB **Do not install this equipment before reading the following instructions:**
Fitting instructions. Advised height 80 cm from the ground. Straight grab bars can be installed obliquely (135°) or horizontally. Before drilling into the wall, physically hold the product against the wall and mark the position of the holes to be drilled. Plugs have to be selected according to the type of wall. The fixings points have to be necessarily respected.
Care and maintenance. IMPORTANT: In order to guarantee the lasting quality of this product and its safety for the user, we recommend that when cleaning it you should use mild soap solutions. **CAUTION: DO NOT USE** cleaning products made of: etones, hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. After use of a cleaning product, make a rinsing in the clear water. **⚠ Safety warnings.** Grab bars add security to the user if they are fitted according to instructions. After fitting and before using, make sure that the fixing screws are tightened securely. **DO NOT** use grab bar as a step to reach area, do not sit or hang on grab bar, use it for assistance **ONLY.** **The product does not contain any hazardous substances. The manufacturer shall have no liability for any injury caused by improper installation or use of this grab bar.** At the end of its life cycle, the user must have the product recycled by a certified facility in the country of use.

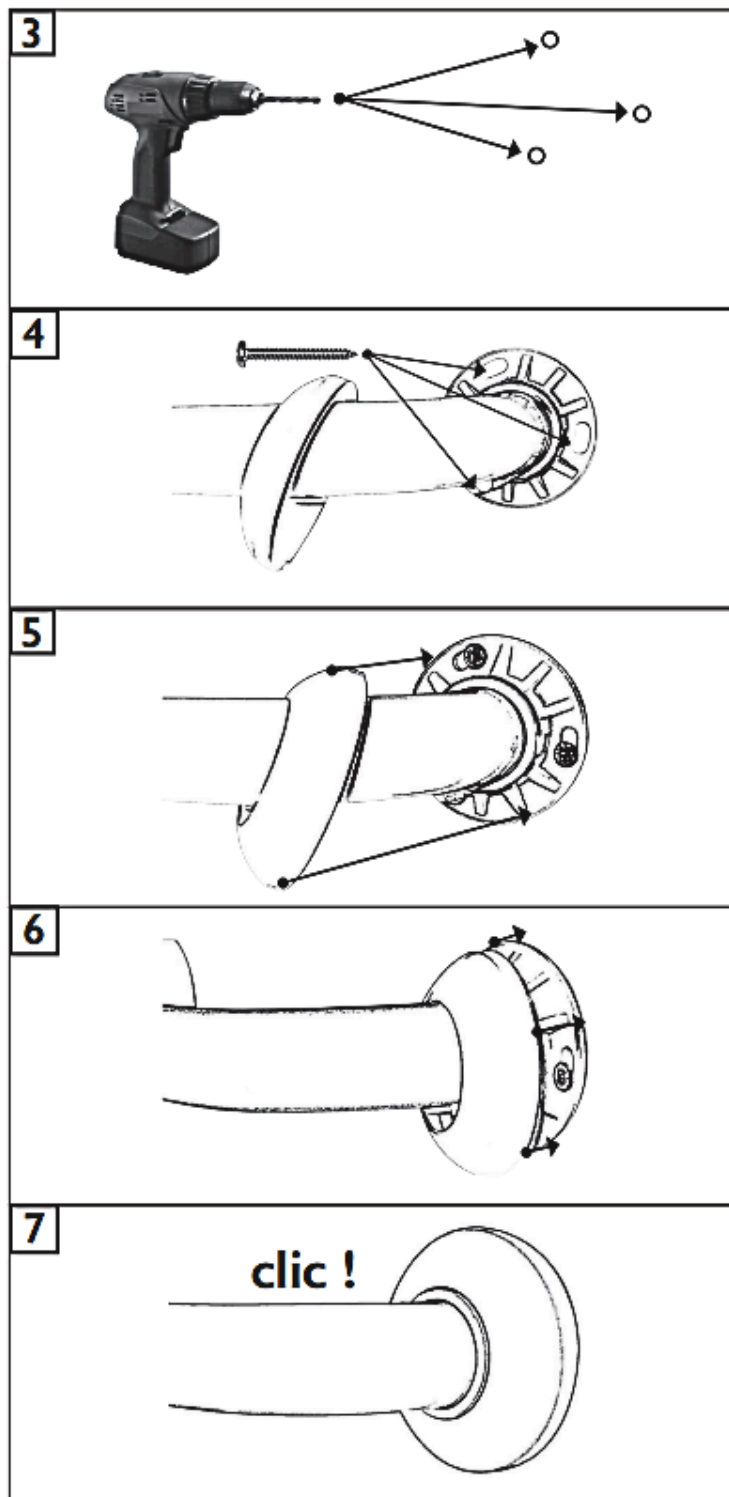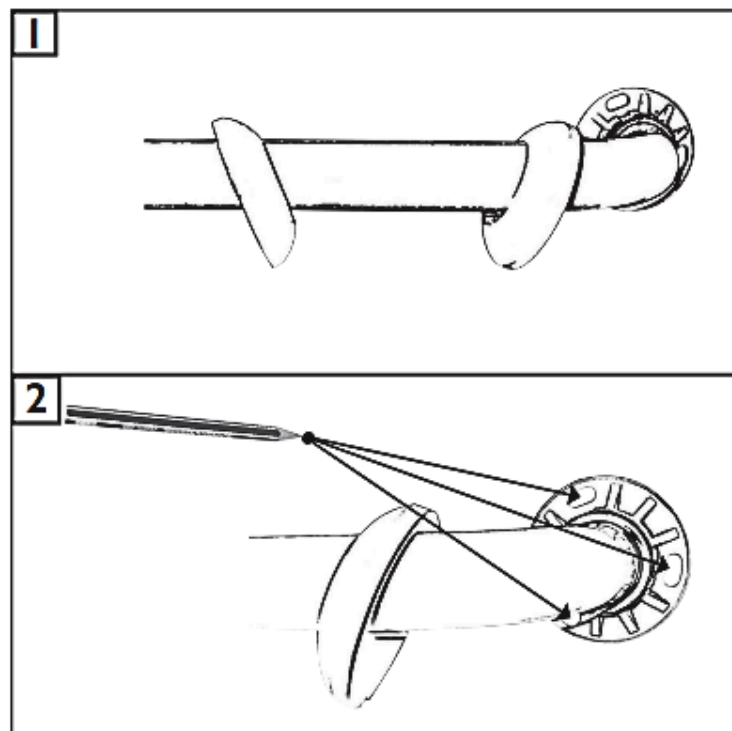

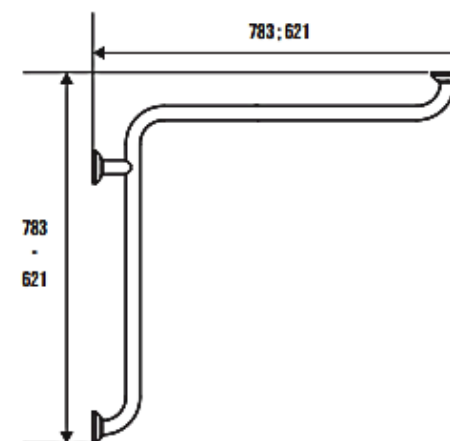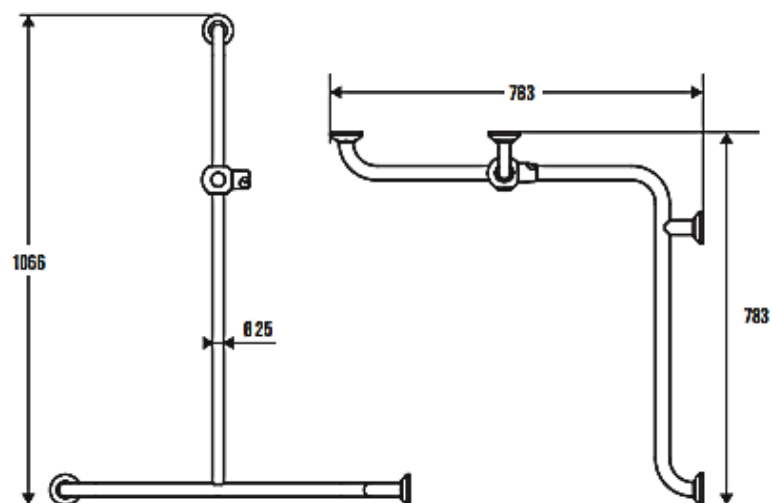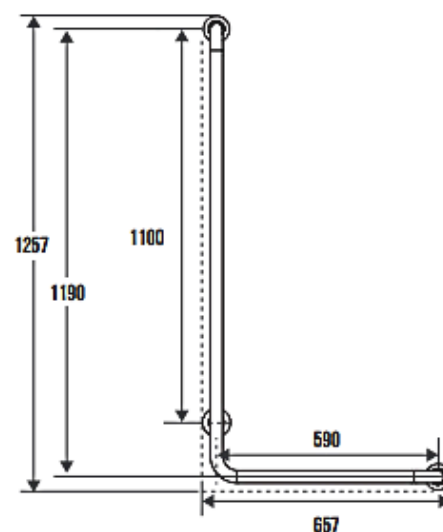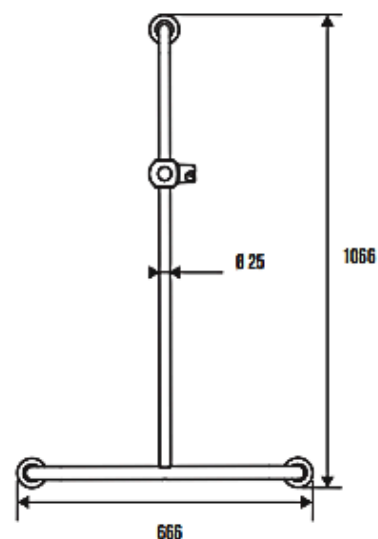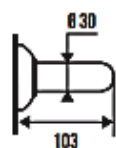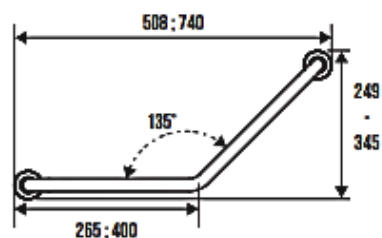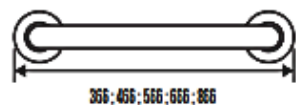

Hopmoov